

# HeatMask+



## ■ HeatMask+ ))))

Le masque électrique chauffant **HeatMask+** est l'appareil indispensable aux soins du visage : il permet à la fois de nettoyer la peau en profondeur et de favoriser la pénétration des principes actifs des produits cosmétiques ; il redonne ainsi vitalité et tonicité à tous types de peaux.

Le **HeatMask+** est le seul masque chauffant 2 zones au monde : 1 petite zone pour le haut du visage et une grande zone pour le bas du visage, y compris le menton et le cou jusqu'aux épaules ; la grande zone a 2 réglages de température : 50% et 100% de la puissance.

## ■ HeatMask+ ))))

*The **HeatMask+** electrical heating mask is the essential device for face cares: it is used as well to clean deeply the skin as to help penetration of cosmetics active principles ; it restores tonus and vitality to every type of skin.*

*The **HeatMask+** is the alone 2 section heating mask in the world: 1 small section for upper part of face, 1 large section for lower part of face, including chin and neck down to shoulders; large section has 2 temperature settings: half and full power.*



Le HeatMask+ agit simultanément dans 3 directions :

- il facilite l'élimination des toxines,
- il optimise les principes actifs des produits de soin,
- il active la micro-circulation périphérique.

## ■ PRINCIPE PHYSIQUE

Le HeatMask+, masque chauffant 2 zones, émet des rayons IRL (Infrarouges Longs) de longueurs d'onde comprises entre 7 et 14 µm ; puisque le corps humain émet des IRL de longueurs d'ondes comprises entre 6 et 20 µm, les IRL émis par le HeatMask+ sont dits "bio-compatibles" : aussi efficaces qu'inoffensifs pour réchauffer le corps humain.

## ■ PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES

- Détoxication : l'effet "sauna" du masque chauffant HeatMask+ permet à la peau d'évacuer ses toxines : la peau est donc nettoyée en profondeur.
- Pénétration : la chaleur provoque une dilatation des pores de la peau, ayant pour effet une augmentation de la perméabilité de la peau aux produits et crèmes de soin utilisés : la pénétration des produits s'en trouve renforcée.
- Oxygénation : l'élévation de température cutanée provoque l'activation de la micro-circulation sanguine et donc une oxygénation des tissus : la peau respire alors davantage.

## ■ HYGIÈNE

Le HeatMask+, comme tous les appareils 3a beauté, bénéficie d'un traitement de qualité hospitalière intégré : c'est un puissant traitement anti-fongique et anti-microbien intégré dans la masse de l'enveloppe extérieure du masque chauffant qui lui confère une qualité hospitalière.

A l'inverse des traitements de surface courants dont l'action est limitée dans le temps, le traitement intégré agit pendant toute la durée de vie du masque chauffant en diffusant en permanence ses principes actifs.

## ■ SÉCURITÉ

Le HeatMask+ est équipé d'un protecteur thermique pour s'auto-proteger en cas de mauvaise utilisation (fonctionnement à vide, plié sur lui-même).

Le HeatMask+, soudé sous haute fréquence, est étanche : il peut être nettoyé simplement avec de l'eau et du savon (ne pas utiliser de désinfectant).

The HeatMask+ simultaneously acts through 3 ways:


- it makes easier the elimination of toxins off the skin,
- it optimizes the active constituents of cosmetics,
- it activates blood micro-circulation.

## ■ PHYSICAL PRINCIPLE

The HeatMask+ 2 section heating mask emits FIR (Far Infra Red) rays of which wave lengths are from 7µm to 14µm ; since human body emits from 6 to 20µm FIR rays, FIR rays emitted by the HeatMask+ heating mask are called bio-compatible: as efficient as harmless to warm human body.

## ■ PHYSIOLOGICAL PRINCIPLES

- Detoxification: the "sauna" effect of the HeatMask+ enables the skin to remove its toxins off the skin: the skin is deeply cleaned.
- Penetration: the heat causes the dilatation of the pores, which results in improved skin permeability.
- Oxygenation: the skin temperature rise causes the activation of blood micro-circulation, and therefore tissue oxygenation: the skin then breathes deeply.

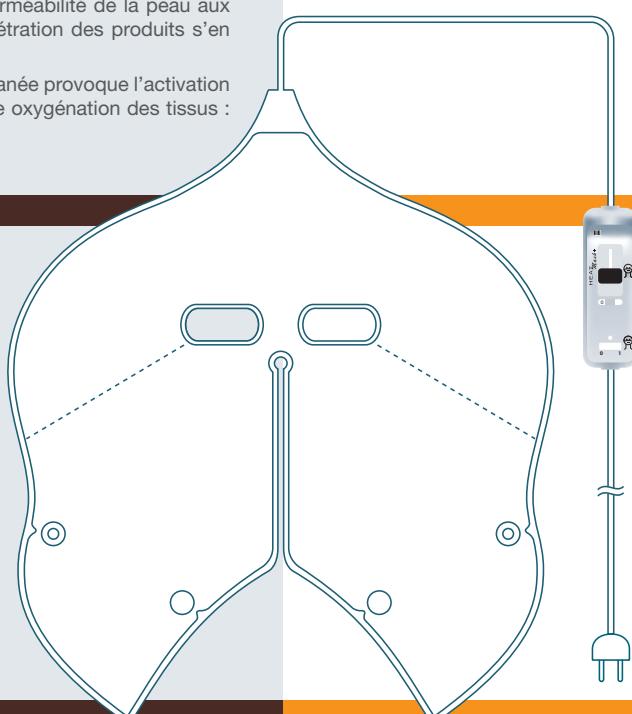

## ■ HYGIENE

HeatMask+ heating mask is built-in hospital care quality treated: this is a powerful anti-microbial and anti-fungal agent which is integrated into the mass of the outside cover.

Unlike current surface treatments, whose action is limited in time, this treatment acts throughout the life of the heating mask, distributing its active agents continuously.

## ■ SAFETY

The HeatMask+ is equipped with a heat protector to self-protect itself when it is used in a wrong way (use without any face inside, doubled up).

The HeatMask+, high frequency welded, is watertight: it can be cleaned simply with water and soap (do not use cleansing agents).



Distribué par / Distributed through



## Caractéristiques techniques

2 zones :

- petite zone pour haut du visage
- grande zone pour bas du visage et cou

Température réglable sur grande zone

Traitement : qualité hospitalière

Coloris : blanc/blanc et chocolat/caramel

Tension : 230V ou 115V

Normes :

EN60335-1 & EN60335-2-17

Garantie : 1 an

## Technical data

2 sections:

- small section for the upper part of face
- large section for lower part of face, including chin and neck

Temperature setting in the large section

Treatment: hospital care quality

Twin colour: white/white & chocolate/toffee

Voltage: 230V or 115V

Standards:

EN60335-1 & EN60335-2-17

Warranty: 1 year